

例：EASY 60H

- 最高水位线
- 人体工程学手柄

- 清洗槽由耐气蚀钢制成

例：EASY 30H

- 降音盖可以降低噪音并加速加热，反转盖后可作滴水盘使用




- 排水阀，与排水口分离设计，操作方便，节省空间

- 定时旋钮，连续操作或可调操作

- 超声波启动/停止

- 温度设置旋钮

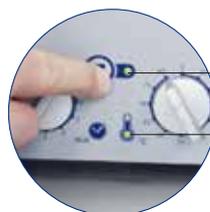

- Pulse脉冲\Sweep清洗LED状态灯

- 温度加热LED状态灯



Singlefrequency  
单频超声



Sweep  
专利清洗



Pulse  
脉冲



Heating  
加热

## 性能特点

- ◆ 高性能的37kHz 换能器，有效传导能量并且耐用
- ◆ Sweep专利技术清洗功能，调频优化声场均匀分布
- ◆ Pulse脉冲功能，增加超声波峰值功率，提升超声功率20%
- ◆ 定时：1~30min或连续操作模式，控温：30℃~80℃，以5℃为刻度
- ◆ 自动开启功能：温度达到设定值，超声清洗自动开始
- ◆ 带有温度阈值报警功能

- ◆ 由耐气蚀不锈钢制成的清洗槽
- ◆ 带有防干烧功能
- ◆ 连续运行8h后自动安全关机
- ◆ 在浴温为90℃时自动安全关闭
- ◆ 人性化的操作面板，防水设计，保护电子器件
- ◆ 防水设计的IEC插头，可拆卸电源线

## 应用范围



Elmasonic EASY 有 9 种不同的型号，设计简洁，使用方便，全不锈钢外壳，100%的 37kHz 超声波输出，集成均一化功能保证声场均匀，配有脉冲模式，能够增加超声波峰值功率的20%，使超声波作用遍布于污物上，轻松快速去除任何油渍，适用于清除顽固污渍，矿物污垢和抛光膏等，更快的完成清洗过程。

温度报警提示功能，可根据不同的需求进行调整，当温度到达设定上限时，设备会发出可视警报信号，防止因高温造成蛋白凝固以及保护敏感部件免受损害。底部拥有较高的底座，防止水花进入电子系统，EASY 60H以上型号的设备均带有排水阀功能，排水方便彻底。



牙科实验室或诊所



医用仪器



珠宝和手表配件



工业部件

## 订货信息

订货号	型号	超声频率 (kHz)	最大容量 (L)	工作容量 (L)	超声功率 (W)	加热功率 (W)	总功率 (W)	外部尺寸 W/D/H (mm)	内部尺寸 W/D/H (mm)	网篮尺寸 W/D/H (mm)	重量 (kg)
107 1646	EASY10H	37	0.8	0.7	30	60	90	206/120/182	190/85/59	177/73/30	2.0
107 1652	EASY20H	37	1.75	1.2	35	120	155	176/176/219	137/123/99	112/103/50	2.1
107 1656	EASY30H	37	2.75	1.9	80	200	280	264/176/219	225/124/99	198/106/50	3.3
107 1664	EASY40H	37	4.25	3.2	140	200	340	263/176/269	220/118/149	190/105/75	4.0
107 1666	EASY60H	37	5.75	4.3	150	400	550	341/196/269	281/132/149	255/115/75	5.1
107 1669	EASY100H	37	9.5	7.5	150	400	550	339/281/272	281/222/149	255/200/75	5.9
107 1671	EASY120H	37	12.75	11.3	200	800	1000	342/285/322	276/216/199	250/190/115	7.5
107 1673	EASY180H	37	18.0	12.9	200	800	1000	371/347/322	303/273/199	280/250/115	8.5
107 1675	EASY300H	37	28.0	20.6	300	1200	1500	544/347/322	477/274/199	455/250/115	11.0

\* EASY10 ~ EASY20H: 脉冲超声波工作模式; EASY30 H - EASY300 H: 双半波超声波工作模式; EASY10H~EASY40H不带排水阀。以上防护等级均为 IP20, 货号中不含不锈钢网篮和降音盖